

AVANOS*

MIC-KEY® BOLUS FEED EXTENSION SET WITH ENFit® CONNECTOR


SECUR-LOK® Straight
Connector

Bolus ENFit®
Connector and Clamp

Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Single Patient Use Only.

⚠ Warning: For enteral nutrition
and/or medication (Rx) only.

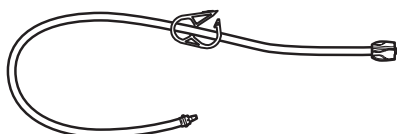

Nonsterile	Not made with natural rubber latex	Product is NOT made with DEHP as a plasticizer	Rx Only
Caution	Consult instructions for use	2797	0143-12 0143-24

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667). www.avanos.com

Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

Avanos Medical Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.

Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd, 475 Victoria Avenue, Chatswood, NSW 2067 Australia.

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

© 2018 AVNS. All rights reserved. 2023-09-11

15-M1-225-03 / 50001871

www.mic-key.com

(EN) MIC-KEY® Bolus Feed Extension Set with ENFit® Connector, with SECUR-LOK® Straight Connector and Bolus ENFit® Connector and Clamp. • Not made with natural rubber latex. • Product is not made with DEHP as a plasticizer. • Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. • Single patient use only.

⚠ Warning: For enteral nutrition and/or medication only. • The MIC-KEY® Extension Sets with ENFit® Connectors are intended to connect to the MIC-KEY® Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube, Enteral Feeding Syringes with ENFit® Connectors, and Feed Administration Bags with ENFit® Connectors. • Device Aftercare: After each use, wash the Extension Set with warm, soapy water and rinse thoroughly. • Device Lifetime: It is intended to be used multiple times for a single patient for up to 14 days.


(FR) Prolongateur d'alimentation par bolus MIC-KEY® avec connecteur ENFit®, connecteur droit SECUR-LOK® et connecteur ENFit® pour bolus et clamp. • Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. • Ce produit n'est pas fabriqué à partir de DEHP comme plastifiant. • Rx Only: Sur ordonnance uniquement : aux États-Unis, la loi fédérale restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur son ordonnance. • Destinée à un seul patient. • ⚠ Avertissement : Pour alimentation et/ou administration de médicaments (Rx) par voie entérale uniquement. • Les prolongateurs MIC-KEY® avec connecteurs ENFit® sont prévus pour se connecter sur la sonde d'alimentation gastrostomique extra-plate MIC-KEY®, les seringues d'alimentation entérale avec connecteurs ENFit® et les sachets d'administration d'alimentation avec connecteurs ENFit®.

Entretien du dispositif après utilisation : après chaque utilisation, lavez le prolongateur à l'eau tiède savonneuse et rincez abondamment. Durée de vie du dispositif : ce dispositif peut être utilisé plusieurs fois sur un seul patient pendant une durée maximale de 14 jours.

(DE) MIC-KEY® Verlängerungsset zur Bolus-Ernährung mit ENFit® Verbindungsstück, SECUR-LOK® geradem Verbindungsstück und Bolus ENFit® Verbindungsstück und Klemme. • Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. • Das Produkt ist nicht mit DEHP als Weichmacher hergestellt. • Rx Only: Verschreibungspflichtig: Laut US-amerikanischem Recht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden. • Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten. • ⚠ Warnung: Nur zur enteralen Ernährung und/oder Verabreichung von Medikamenten (Rx). • Die MIC-KEY® Verlängerungssets mit ENFit® Verbindungsstücken sind zum Anschluss an MIC-KEY® Low-Profile Gastrostomie-Ernährungs sonden, enterale Ernährungsspritzen mit ENFit® Verbindungsstücken und Ernährungsbeutel mit ENFit® Verbindungsstücken gedacht. • Reinigungshinweise: Das Verlängerungsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich spülen. • Verwendungsdauer: Das Verlängerungsset kann bei einem Patienten mehrmals verwendet werden, maximal 14 Tage.

(BG) MIC-KEY® комплект удължител за болусно хранене с ENFit® конектор, SECUR-LOK® прав конектор и болус ENFit® конектор и клипса. • При производството не е използван латекс от естествен каучук. • Този продукт не съдържа DEHP (ди(2-етилхексил) фталат) като пластификатор. • Rx Only: Само Rx: Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това изделие от или по нареждане на лекар. • За употреба само от един пациент. • ⚠ Предупреждение: само за ентéralно хранене и/или прилагане на медикаменти (Rx). • Комплектът удължител MIC-KEY® с ENFit® конектори са предназначени за свързване към нископрофилни гастростомни хранителни сонди MIC-KEY®, спринцовки за ентéralно хранене с ENFit® конектори и торбички за изкуствено хранене с ENFit® конектори. • Грижа за устройството след употреба: След всяка употреба измивайте комплекта за удължаване с топла сапунена вода и изплаквайте обилно. • Експлоатационен живот на устройството: Предназначено е да се използва многократно за един пациент за период до 14 дни.

(ES) Juego de extensión para alimentación en bolo MIC-KEY® con Conector ENFit®, Conector recto SECUR-LOK®, Conector para bolo ENFit® y pinza. • No fabricado con látex de goma natural. • El producto no está fabricado con DEHP como plastificador. • Rx Only: Venta sólo por receta facultativa. Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o por receta facultativa. • Uso indicado: para un solo paciente. • ⚠ Advertencia: Sólo para alimentación enteral y/o medicamentos recetados (Rx). • Los Juegos de extensión MIC-KEY® con Conectores ENFit® están hechos para conectar con el tubo de alimentación por gastrostomía de perfil plano MIC-KEY®, las Jeringas para alimentación enteral con Conectores ENFit® y las Bolsas para administrar alimento con Conectores ENFit®. • Mantenimiento del

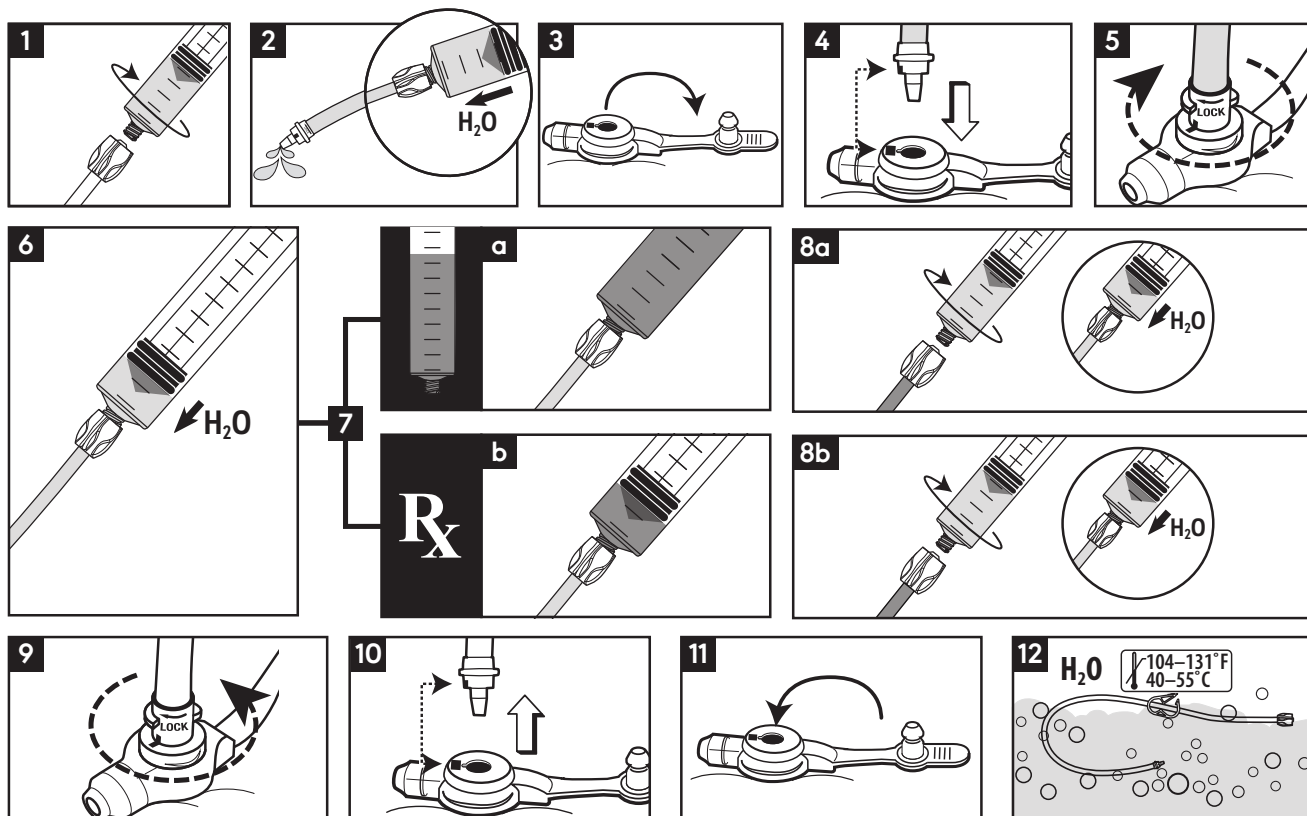

dispositivo: después de cada uso, limpie la extensión con agua tibia y jabón y luego enjuáguela con abundante agua.

Duración del dispositivo: está pensado para utilizarse varias veces para un solo paciente durante un máximo de 14 días.

(S) Produčuvací souprava MIC-KEY[®] na bolusové podávání výživy s konektorem ENFit[®], primým konektorem SECUR-LOK[®] a bolusovým konektorem ENFit[®] a sorkvork - Vyrobeno bez přírodního gumového latexu. • Produkt není vyroben s DEHP jako plastifikátorem. • Rx Only: Pouze na předpis: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jeho předpis. • Pouze pro použití u jediného pacienta. • **⚠Varování: Pouze pro enterální výživu a/nebo léky (Rx).** • Produčovací soupravy MIC-KEY[®] s konektory ENFit[®] jsou určeny pro spojení s nízkoprofilovou gastrostomií užívatelů trubici MIC-KEY[®], enterálními výživovými strikákami s konektory ENFit[®] a sáčky na podávání výživy s konektory ENFit[®]. **Následná péče o zařízení:** Po každém použití umyte produčovací soupravu teplou mydlovou vodou a důkladně ji opláchněte. **Životnost zařízení:** Jsou určeny k opakovanému použití u jednoho pacienta po dobu až 14 dnů.

(A) MIC-KEY[®] bolusermæringsindgivelsesforlænger med ENFit[®] fittings, SECUR-LOK[®] lige studs, bolus ENFit[®] studs og klemme. • Ikke fremstillet af naturgummilatex. • Ikke fremstillet med DEHP blødgøringsmiddel. • Rx Only: Receptpligtig. Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordning af en læge. • Kun beregnet til brug på én patient. • **⚠Advarsel: Kun beregnet til enteral ernærings- og lægemiddelindgivelse (Rx).** • MIC-KEY[®] forlænger med ENFit[®] fittings er beregnet til tilslutning til MIC-KEY[®] gastrostomierøringssonder med lav profil, enteralemæringsrørjet med ENFit[®] fittings og ernæringsposer med ENFit[®] fittings. **Pleje af udstyret:** Efter hver brug skal du vaske forlængersættet med varmt sæbevand og skylles grundigt efter. **Udstyrets brugstid:** Udstyret er beregnet til flegangsbrug på en enkelt patient i en periode på op til 14 dage.

(E) MIC-KEY[®] boolustoitmise pikenduskomplekt ENFit[®] konnektori, SECUR-LOK[®] sirge konnektori ja boolustoitmise ENFit[®] konnektori ning klambriга. • Ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist. • Toote valmistamisel ei ole plastifikaatorina kasutatud DEHP-d. • Rx Only: Ainult Rx: USA föderaalseaduse lubavad seda seadet müüa ainult arstidel või arsti korraldusel. • Kasutamiseks ainult ühel patsiendil. • **⚠Hoiatus: ainult enteraalseteks toitmisteks ja/või ravimi manustamiseks (Rx).** • ENFit[®] konnektorige MIC-KEY[®] pikenduskomplektid on mõeldud MIC-KEY[®] madala profiiliga gastrostomia toiteotsid, ENFit[®] konnektorige enteralse toiteotsidest süstalde ja ENFit[®] konnektorige taldri nutumastide kottide ühendamiseks. **Seadme järelhooldus:** pärast iga kasutuskorda peske pikenduskomplekti sooja seebeveega ning loputage põhjalikult. **Seadme kasutusajad:** see on ette nähtud ühel patsiendil mitmekordseks kasutamiseks kuni 14 päeva.

(L) ΣΕΤ προεκτάκης διαλείπουσας (bolus) οίτησης MIC-KEY[®] με σύνδεσμο ENFit[®], εύθυγράμμο σύνδεσμο SECUR-LOK[®], σύνδεσμο διαλείπουσας οίτησης ENFit[®] και σφιγκτήρα. • Δεν παρασκευάζεται με φυσικό ελαστικό λατέξ. • Το προϊόν ΔΕΝ κατασκευάζεται (ή) ΧΡΗΣΗ περιέρχεται την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής μόνο από ιατρό ή με συνταγή ιατρού. Η ομοιοπαθική νομοθεσία (ή) ΗΠΑ) περιέρχεται την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής μόνο από ιατρό ή με συνταγή ιατρού. • Για χρήση σε έναν ασθενή μόνο. • **⚠Προειδοποίηση: Αποκλειστικά για εντερική οίτηση και/ή χορήγηση φαρμάκων (Rx).** • Τα ΣΕΤ προεκτάκης MIC-KEY[®] με σύνδεσμο ENFit[®] προορίζονται για σύνδεση με τον Σωλήνα οίτησης μέσω γαστροστομίας χαμηλού προφίλ MIC-KEY[®], τις Σύνδεγες εντερικής οίτησης με σύνδεσμο ENFit[®], και τους Ακουούς χορήγησης οίτησης με σύνδεσμο ENFit[®]. **Φροντίδα της συσκευής μετά τη θεραπεία:** Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ επεκτάκης με ζεστό νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε σχολαστικά. **Διάρκεια ζωής της συσκευής:** Προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις για έναν μόνο ασθενή για έως και 14 ημέρες.

(T) Set MIC-KEY[®] di estensione per alimentazione in bolo con connettore ENFit[®], connettore dritto SECUR-LOK[®], connettore per bolo ENFit[®] e morsetto. • Non fabbricato in lattice di gomma naturale. • Questo prodotto non è realizzato con DEHP come plastificante. • Rx Only: Solo dietro prescrizione medica: la normativa federale statunitense limita la vendita del presente dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione di un medico. • Da usarsi esclusivamente su un singolo paziente. • **⚠Avvertenza - Esclusivamente per la somministrazione di nutrizione e/o farmaci per via enterale (Rx).** • I set di estensione MIC-KEY[®] con connettori ENFit[®] si collegano al tubo MIC-KEY[®] a basso profilo per alimentazione tramite gastrostomia, alle siringhe per nutrizione enterale con connettori ENFit[®] e alle sacche di alimentazione con connettori ENFit[®]. **Curra successiva del dispositivo:** dopo ogni utilizzo, lavare il kit di prolunga con acqua tiepida e sapone, quindi risciacquare accuratamente. **Durata del dispositivo:** è destinato a essere utilizzato più volte per un singolo paziente per un massimo di 14 giorni.

(V) MIC-KEY[®] bolus barošanas pagarinājuma komplekts ar ENFit[®] savienotāju SECUR-LOK[®] taisno savienotāju un bolus ENFit[®] savienotāju un skavu • Nav izgatavots no dabīgās gumijas lateksa. • Izstrādājums nav izgatavots ar DEHP kā plastifikatoru. • Rx Only: Tikai ar ārsta recepti: ASV federālās likums nosaka šīs ierīces pārdošanu tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma. • Lietot tikai vienam pacientam. • **⚠Bridinājums: Tikai enterālāi barošana un/vai receptuāli zāļu ievade (Rx).** • MIC-KEY[®] pagarinājuma komplekti ar ENFit[®] savienotājiem ir paredzēti savienojumam ar MIC-KEY[®] kompaktā gastrostomijas barošanas zondi, enterālās barošanas šļircēm ar ENFit[®] savienotājiem, un barošanas maisījumi ar ENFit[®] savienotājiem. **Ierīces pēcapkopē:** Pēc katras lietošanas nomazgājiet pagarinātāja komplektu ar siltu ziepjūdeni un rūpīgi noskalojiet. **Ierīces kalpošanas laiks:** Tas ir paredzēts lietošanai vairākas reizes vienam pacientam līdz 14 dienām.

(H) MIC-KEY[®] ilglaimes bolusinio maitinimo priedas su ENFit[®] jungtimis, tiesia SECUR-LOK[®] jungtimis, boliuso ENFit[®] jungtimis ir spaustuks • Pagaminta be natūralio kaučiuko lateksu. • Gaminy pas gamintas nenaudojant plastikid (Rx). • Rx Only: Receptinis priedaisas – federaliniai (JAV) sistemuji numato, kad šį įtaisą galima parduoti tik gydytojiui arba jo nurodymu. • Naudoti tik vienam ligoniui. • **⚠Įspėjimas! Skirta tik enterinei mitybai ir (ar) vaistams (Rx).** • MIC-KEY[®] ilginamieji priedai su ENFit[®] jungtimis yra skirti prijungti prie MIC-KEY[®] kompaktiško gastrostominio maitinimo zondų, enterinio maitinimo švirkštų su ENFit[®] jungtimis ir lašinio maitinimo maiši su ENFit[®] jungtimis. **Priemonės priežiūra po naudojimo:** kaskart panaudoję nuplaukite ilginimo rinkinį šilto, muiliniu vandeniu ir kruopščiai išskalaukite. **Priemonės naudojimo laikotarpis:** skirta naudoti kelis kartus vienam pacientui iki 14 dienų.

(U) MIC-KEY[®] bolus adagolóhosszabbító-készlet ENFit[®] csatlakozóval, SECUR-LOK[®] egyenes csatlakozóval, valamint bolus ENFit[®] csatlakozóval és szorítóval • Nem természetes latexgumiból készült. • A termék nem tartalmaz DEHP (di-(2-ethylhexyl)-ftalát) lágyítószerrel. • Rx Only: Kizárólag orvosi rendelvényre: Az (Amerikai Egyesült Államok) szövetségi törvényei értelmében az eszköz csak orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető. • Egyeszer használható. • **⚠Figyelem: Csak belső táplálásra és/vagy gyógyszeradagolásra (Rx).** • Az ENFit[®] csatlakozóval ellátott MIC-KEY[®] hosszabbító-készlet csatlakoztatható a MIC-KEY[®] alacsony profilú gasztrosztómias adagolószondához, az enterális tápláláshoz használt, ENFit[®] csatlakozóval ellátott fecskendőhöz és az ENFit[®] csatlakozóval ellátott adagolószákhoz. **Használat utáni tisztítás:** Minden használat után mossa el a hosszabbító-készletet meleg mosószers vízzel, majd öblítse le alaposan. **Eszköz élettartama:** A készlet egyetlen betegten, több alkalommal, legfeljebb 14 napig használható.

(NL) MIC-KEY[®] verlengset voor bolusvoeding met ENFit[®]-verbindingsstuk, SECUR-LOK[®] rechts verbindingsstuk en bolus ENFit[®]-verbindingsstuk en klem • Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. • Het product is niet vervaardigd met DEHP als weekmaker. • Rx Only: Uitsluitend voor voorschrijf verkrijgbaar: Volgens de federale wetgeving (van de Verenigde Staten) mag dit medische hulpmiddel uitsluitend door of voor voorschrijf van een arts worden verkocht. • Uitsluitend voor gebruik bij een enkele patiënt. • **⚠Waarschuwing: uitsluitend voor enterale voeding en/of medicatie (Rx).** • De MIC-KEY[®]-verlengsets met ENFit[®]-verbindingsstukken dienen aangesloten te worden op de MIC-KEY[®]-voedingssonde met laag profiel voor gastrostomie, enterale voedingspuiten met ENFit[®]-verbindingsstukken en toedieningszakken van de voedingsoplossing met ENFit[®]-verbindingsstukken. **Nazorg van apparaat:** Was de Extension Set na elk gebruik met warm zeepsond en spoel deze grondig af.

(D) MIC-KEY[®] Bolus mateutvidelsessett med ENFit[®] kobling, SECUR-LOK[®] rett kobling og Bolus ENFit[®] kobling og klemme • Ikke laget med naturgummilatex. • Produktet er ikke produsert med DEHP som plastiseringsmiddel. • Rx Only: Fås kun på resept: Amerikansk federal lov begrenser dette apparatet til salg til eller på ordre fra lege. • Kun for engangsbruk. • **⚠Advarsel: Kun for enteral næring og medisiner (Rx).** • MIC-KEY[®] utvidelsessett med ENFit[®] koblinger er beregnet for å kobles til MIC-KEY[®] lavprofil matenter, enterale matesprøyter med ENFit[®] koblinger og næringsadministreringsposer med ENFit[®] koblinger. **Enhetens ettermær:** Etter hver bruk, vaske forlengersettet med varmt, såpevann og skyll grundig. **Enhetens levetid:** Den er ment å brukes flere ganger for en enkelt pasient i opptil 14 dager.

(C) Zestawy przedłużające MIC-KEY[®] do podawania bolusa żywnieniowego ze złączem ENFit[®], złączem prostym SECUR-LOK[®] i złączem do podawania bolusa ENFit[®] oraz zaciskiem • Wyprodukowano bez lateksu naturalnego. • Produkt nie jest wytwarzany z użyciem DEHP jako środka uplastyczniającego. • Rx Only: Wyłącznie na receptę: Zgodnie z prawem federalnym (w USA) urządzenie to może być sprzedawane wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie. • Do użytku tylko u jednego pacjenta. • **⚠Ostrzeżenie: Wyłącznie do żywienia dojelitowego oraz/ lub podawania leków (Rx).** • Zestawy przedłużające MIC-KEY[®]

ze złączami ENFit[®] przeznaczone są do niskoprofilowych zgłębników gastrostomijnych MIC-KEY[®], strzykawek do żywienia dojelitowego ze złączami ENFit[®] i worków wypełnionych preparatem żywnieniowym ze złączem ENFit[®]. **Konservacja urządzeń:** po każdym użyciu umyć zestaw przedłużający ciepłą wodą z mydłem i dokładnie spłukać. **Okres eksploatacji urządzenia:** produkt jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta przez okres do 14 dni.

(PT) Conjunto de extensão para alimentação em bolo MIC-KEY[®] com conector ENFit[®], conector recto SECUR-LOK[®] e conector para bolo ENFit[®] e pinça • Não são feitas com látex de borracha natural. • Este produto não é fabricado com di-ethylhexil ftalato (DEHP) como plastificante. • Rx Only: Apenas sob receita médica: A lei federal (E.U.A.) limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico. • Apenas para utilização única. • **⚠Advertência: para alimentação e/ou administração de medicamentos (Rx) apenas por via entérica.** • Os conjuntos de extensão MIC-KEY[®] com conectores ENFit[®] destinam-se a ligar ao tubo para alimentação por gastrostomia pouco visível MIC-KEY[®], às seringas para alimentação por via entérica com conectores ENFit[®] e aos sacos para administração de alimentos com conectores ENFit[®]. **Cuidados com o dispositivo:** Após cada utilização, lave o conjunto de extensão com água morna e sabão e enquee bem. **Vida útil do dispositivo:** Destinam-se a ser utilizados várias vezes num único paciente durante um máximo de 14 dias.

(RO) Set prelungitor MIC-KEY[®] pentru alimentare in bolus, cu conector ENFit[®], conector drept SECUR-LOK[®] și conector ENFit[®] pentru bolus și demă • Nu este produs din latex din cauciu natural. • Acest produs nu conține DEHP ca plastifiant. • Rx Only: Doar Rx: Conform legii federale S.U.A., acest dispozitiv poate fi vândut numai de către un medic sau la ordinele acestuia. • A se utiliza numai la un singur pacient. • **⚠Avertizare: Numai pentru alimentare și/sau medicație enterică (Rx).** • Seturile prelungitoare MIC-KEY[®] cu conectori ENFit[®] sunt destinate conectării la tubul simplu de alimentare gastrostomică MIC-KEY[®], seringile de alimentare enterală cu conectori ENFit[®] și pungile de alimentare cu conectori ENFit[®]. **Îngrijirea după utilizare:** După fiecare utilizare, spălați Setul de extensie cu apă caldă și săpun și clătiți bine. **Durata de viață a dispozitivului:** Este conceput pentru a fi utilizat de mai multe ori la un singur pacient, timp de până la 14 zile.

(RU) Удлинительные наборы для болюсного введения питания MIC-KEY[®] с разъемом ENFit[®], прямогольным разъемом SECUR-LOK[®] и разъемом для болюсного введения ENFit[®] и зажимом • При изготовлении не использованы натуральный латекс. • Изделие не содержит диэтилгексилфталата (DEHP) в качестве пластификатора. • Rx Only: Отпускается только по предписанию врача. Согласно федеральному законодательству (ША, данное устройство подлежит продаже только врачам или по их заказу. • Предназначено для использования только у одного пациента. • **⚠Предостережения: Предназначено только для введения составов для парентерального питания и лекарственных средств (Rx).** • Удлинительные наборы MIC-KEY[®] с разъемом ENFit[®] предназначены для соединения с низкопрофильной гастростомической питательной трубкой MIC-KEY[®], шприцами для парентерального питания с разъемом ENFit[®], а также с пакетами для ввода питания с разъемом ENFit[®]. **Уход за изделием:** после каждого использования промойте набор для питания теплым мыльным раствором и тщательно прополощите. **Срок службы изделия:** набор предназначен для многократного использования у одного пациента в течение до 14 дней.

(SK) Predlžovací souprava MIC-KEY[®] na bolusové podávání výživy s konektorem ENFit[®], přímým konektorem SECUR-LOK[®] a bolusovým konektorem [™] a sorkvork • Vyrobené bez přírodního gumového latexu. • Produkt nie je vyrobený s DEHP ako plastifikátor. • Rx Only: Len na predpis: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto nástroja na lekára alebo na jeho predpis. • Len na použitie u jediného pacienta. • **⚠Varovanie: Len pre enterálnu výživu a/alebo lieky (Rx).** • Predlžovacia súprava MIC-KEY[®] s konektormi ENFit[®] sú určené na spojenie s nízkoprofilovou gastrostomiou užívatelovou trubicou MIC-KEY[®], enterálnymi výživovými striekákami s konektormi ENFit[®] a vrecami na podávanie výživy s konektormi ENFit[®]. **Následná starostlivosť o zariadenie:** Po každom použití umyte predlžovaciu súpravu teplou mydlovou vodou a dôkladne ju opláchnite. **Životnosť zariadenia:** Je určené na viacsadobné použitie pre jedného pacienta po dobu až 14 dní.

(SL) MIC-KEY[®] podaljšek za bolusno hranjenje z ENFit[®] konektorjem, ravnim SECUR-LOK[®] konektorjem in bolusnim ENFit[®] konektorjem in spojko • Ni narejeno iz kavčuka iz naravnega lateksa. • Izdelku ni dodan DEHP za mehčalec. • Rx Only: Samo na recept: Zvezni (ZDA) zakon predpisuje, da sme ta pripomoček prodati samo zdravniku oz. se ga lahko prodajo samo po naročilu zdravnika. • Za uporabo na samo enemu bolniku. • **⚠Opozorilo: Samo za enteralno hranjenje in/ali dajanje zdravil (Rx).** • MIC-KEY[®] podaljški z ENFit[®] konektori so namenjeni povezavi z MIC-KEY[®] gastrostomsko cevko za hranjenje z nizkim profilom, enteralnimi brizgalkami za hranjenje z ENFit[®] konektori in vrečkami za dovajanje hrane z ENFit[®] konektori. **Skrb za pripomoček:** Komplet podaljškov po vsaki uporabi umyte s toplo milnico in ga temeljito sperite. **Življenjska doba pripomočka:** Namenjeni so večkratni uporabi pri enem bolniku do 14 dni.

(F) Bolusuorukinnan MIC-KEY[®]-jatkosarja, jossa on ENFit[®]-liitin, SECUR-LOK[®]-suorakalmiitin, ENFit[®]-bolusliitin ja punstin • Ei valmistettu luonnonkummilateksista. • Tuotetta ei ole valmistettu käyttämällä DEHP:tä pehmittimänä. • Rx Only: Ainoastaan reseptillä: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myytäväksi lääkärintoimesta tai määräyksellä. • Potilaskohintaan. • **Varoitusta: Vain enteraalista ruokintaan tai lääkitystä (Rx) varten.** • ENFit[®]-jatkosarjat, joissa on ENFit[®]-liittimet, on tarkoitettu liitettäväksi seuraaviin: matalaprofilinen MIC-KEY[®]-maha-vanneruokintaletku, enteralistet ruokintaruokistukset, joissa on ENFit[®]-liittimet, ja ruokintapusurit, joissa on ENFit[®]-liittimet. **Ennen jalkäihöitä:** pese pidentysjärja jokaisen käyttökerran jälkeen lämpimällä saippuavedellä ja huuhtele huolellisesti. **Laitteen käyttöä:** sitä on tarkoitus käyttää useita kertoja yhdeksi potilaalle enintään 14 päivän ajan.

(SV) MIC-KEY[®] förlängningsset för bolusmatning, med ENFit[®]-koppling, SECUR-LOK[®] rätvinkelkoppling och ENFit[®]-boluskoppling samt klämma • Är tillverkad med naturgummilatex. • Denna produkt är inte tillverkad med DEHP som plastfukgörare. • Rx Only: Endast på förskrivning av läkare: Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare. • Endast för användning till en patient. • **⚠Varning! Endast för enteral näringstillförel och/ eller (Rx) medicinerig.** • MIC-KEY[®] förlängningsset med ENFit[®]-kopplingar är avsedda att anslutas till MIC-KEY[®] gastrostomiosid i lågprofil, sondsprutor för enteral näringstillförel med ENFit[®]-kopplingar, samt sondmattningspåsar med ENFit[®]-kopplingar. **Skötsel av enheten:** Efter varje användning, tvätta förlängningssettet med varmt tvålatten och skölj noggrant. **Enhetens livslängd:** Enheten är avsedd att användas flera gånger på en enda patient i upp till 14 dagar.

(TR) MIC-KEY[®] ENFit[®] Konektörli Bolus Besleme Uzatma Seti, SECUR-LOK[®] Düz Konektör ve Bolus ENFit[®] Konektör ve Keleçe • Doğal kauçuk lateksten imal edilmemiştir. • Bu ürün plastikleştirici olarak DEHP kullanılarak üretilmemiştir. • Rx Only: Yalnızca Reçete ile: Federal (A.B.D) kanunları bu cihazın yalnızca hekim tarafından veya hekim talimatı üzerine satışı yasaklamaktadır. • Sadece Tek Hastalık Kullanım İçindir. • **Uyarı: Sadece enteral besleme ve/veya ilaç (Rx) için.** • MIC-KEY[®] ENFit[®] Konektörli Uzatma setleri MIC-KEY[®] ENFit[®] Konektörli Düşük Profil Gastrostomi Besleme Borusu, Enteral Besleme Sırıngaları ve ENFit[®] Konektörli Besleme Uygulama Çantaları ile bağlanmak üzere tasarlanmıştır. **Kullanım Sonrası Cihaz Bakımı:** Her kullanımdan sonra Uzatma Setini ilk, sabunu su ile yıkayın ve iyice durulayın. **Cihaz Kullanım Ömrü:** Tek bir hastada 14 güne kadar birden fazla kez kullanılması amaçlanmıştır.

(JA) MIC-KEY[®] ボーラス栄養供給エクステンションセット (ENFit[®]コネクター, SECUR-LOK[®]直角コネクター, ボーラスENFit[®]コネクターとクランプ付き) • 天然ゴムラテックスは使用していません。 • 製品の可塑剤にDEHPを使用していません。 • Rx Only: 処方による使用のみ (米国): 米国連邦法では、本装置の販売先は医師自身あるいは医師の指示を受けた者に限られています。 • 再使用禁止。 • **⚠警告: 経腸栄養剤 / 薬剤専用 (Rx).** • MIC-KEY[®]エクステンションセット (ENFit[®]コネクター付き) は、MIC-KEY[®]ロープロフィール胃腸栄養供給チューブ、経腸栄養供給シリンドリ (ENFit[®]コネクター付き)、栄養供給投与バッグ (ENFit[®]コネクター付き) と接続するために使用されます。 • 機器のメンテナンス: 使用後は、延長セットを温かい石鹸水で洗い、十分に洗剤流してください。 • 機器のライフタイム: 1 人の患者で最大 14 日間複数回使用することを目的としています。

(KO) MIC-KEY[®] 볼루스 식전 연장 세트, ENFit[®] 커넥터, SECUR-LOK[®] 직선 커넥터, Bolus ENFit[®] 커넥터 및 클램프 포함 • 천연 고무 라텍스로 제조하지 않음. • 가스제로서 DEHP로 제품을 제조하지 않았습니다. • Rx Only: 처방 전용: 미국 연방법에 따라 이 장치는 의사가 직접 판매하거나 의사의 지시에 따라 판매할 수 있습니다. • 모든 명의 환자에게만 사용하십시오. • **⚠경고: 경장영양 및/또는 의약품(Rx)에 한함.** • ENFit[®] 커넥터가 포함된 MIC-KEY[®] 연장 세트는 MIC-KEY[®] 소형 위장 음식 튜브, ENFit[®] 커넥터가 포함된 경장 음식 튜브, ENFit[®] 커넥터가 포함된 음식 투여 배에 연결하기 위한 제품입니다. **장치 애프터케어:** 매번 사용 후에는 따뜻한 비눗물로 확장 세트를 씻어내고 철저히 행합니다. **장치 수명:** 최대 14일 동안 환자 한 명에게 여러 번 사용할 수 있습니다.