


MIC-KEY* CONTINUOUS FEED EXTENSION SET WITH ENFit® CONNECTORS

SECUR-LOK® Right Angle Connector 2 Port "Y" ENFit® Connectors and Clamp

Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Single Patient Use Only.

⚠ Warning: For enteral nutrition
and/or medication (Rx) only.

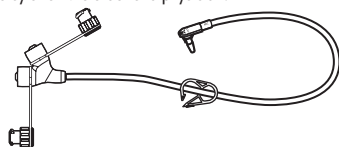

	Nonsterile	Not made with natural rubber latex	Product is NOT made with DEHP as a plasticizer	Rx Only
	Caution		Consult instructions for use	REF 0141-12 0141-24

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667). www.avanos.com

Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

Avanos Medical Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.

Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd, 475 Victoria Avenue, Chatswood, NSW 2067 Australia.

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

© 2018 AVNS. All rights reserved. 2023-09-11

15-M1-333-03 / 50001870

www.mic-key.com

(EN) MIC-KEY® Continuous Feed Extension Set with ENFit® Connectors with SECUR-LOK® Right Angle Connector and 2 Port "Y" ENFit® Connectors and Clamp • Not made with natural rubber latex. • Product is not made with DEHP as a plasticizer. • Rx Only: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. • Single patient use only. • ⚠ Warning: For enteral nutrition and/or medication only. • The MIC-KEY® Extension Sets with ENFit® Connectors are intended to connect to the MIC-KEY® Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube, Enteral Feeding Syringes with ENFit® Connectors, and Feed Administration Bags with ENFit® Connectors. • Device Aftercare: After each use, wash the Extension Set with warm, soapy water and rinse thoroughly. • Device Lifetime: It is intended to be used multiple times for a single patient for up to 14 days.


(FR) Prolongateur d'alimentation continue MIC-KEY® avec connecteurs ENFit®, connecteur à angle droit SECUR-LOK® et connecteurs ENFit® en « Y » à 2 orifices et clamp • Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. • Ce produit n'est pas fabriqué à partir de DEHP comme plastifiant. • Rx Only: Sur ordonnance uniquement : aux États-Unis, la loi fédérale restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur son ordonnance. • Destiné à un seul patient. • ⚠ Avertissement : Pour alimentation et/ou administration de médicaments (Rx) par voie entérale uniquement. • Les prolongateurs MIC-KEY® avec connecteurs ENFit® sont prévus pour se connecter sur la sonde d'alimentation gastrostomique extra-plate MIC-KEY®, les seringues d'alimentation entérale avec connecteurs ENFit® et les sachets d'administration d'alimentation avec connecteurs ENFit®. • Entretien du dispositif après utilisation : après chaque utilisation, lavez le prolongateur à l'eau tiède savonneuse et rincez abondamment. • Durée de vie du dispositif : ce dispositif peut être utilisé plusieurs fois sur un seul patient pendant une durée maximale de 14 jours.

(DE) MIC-KEY® Verlängerungsset für die kontinuierliche Ernährung mit ENFit® Verbindungsstücken, mit SECUR-LOK® rechtwinkligem Verbindungsstück und 2 Port-„Y“-ENFit® Verbindungsstücken und Klemme • Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. • Das Produkt ist nicht mit DEHP als Weichmacher hergestellt. • Rx Only: Verschreibungspflichtig: Laut US-amerikanischem Recht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden. • Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten. • ⚠ Warnung: Nur zur enteralen Ernährung und/oder Verabreichung von Medikamenten (Rx). • Die MIC-KEY® Verlängerungssets mit ENFit® Verbindungsstücken sind zum Anschluss an MIC-KEY® Low-Profile Gastrostomie-Ernährungs sonden, enterale Ernährungs spritzen mit ENFit® Verbindungsstücken und Ernährungsbeutel mit ENFit® Verbindungsstücken gedacht. • Reinigungshinweise: Das Verlängerungsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich spülen.

Verwendungsdauer: Das Verlängerungsset kann bei einem Patienten mehrmals verwendet werden, maximal 14 Tage.

(BG) MIC-KEY® комплект удължител за непрекъснато хранене с ENFit® конектори, SECUR-LOK® конектор под прав ъгъл и Y-образни конектори ENFit® с два порта и клампа • При производството не е използван латекс от естествен каучук. • Този продукт не съдържа DEHP (дип(2-етилхексил) фталат) като пластификатор. • Rx Only: Само Rx: Федералните закони (на АЦЩ) ограничават продажбата на това изделие от или по нареждане на лекар. • За употреба само от един пациент. • ⚠ Предупреждение: само за ентéralно хранене и/или прилагане на медикаменти (Rx). • Комплектът удължители MIC-KEY® с ENFit® конектори са предназначени за свързване към нископрофилни гастростомни хранителни сонди MIC-KEY®, спринцовки за ентéralно хранене с ENFit® конектори и торбички за изкуствено хранене с ENFit® конектори. • Грижа за устройството след употреба: След всяка употреба измивайте комплекта за удължаване с топла сапунена вода и изплаквайте обилно. • Експлоатационен живот на устройството: Предназначено е да се използва многократно за един пациент за период до 14 дни.

(ES) Juego de extensión para alimentación continua MIC-KEY® con Conectores ENFit®, Conector de ángulo recto SECUR-LOK®, Conectores bifurcados de dos puertos ENFit® y pinza. • No fabricado con látex de goma natural. • El producto no está fabricado con DEHP como plastificador. • Rx Only: Venta sólo por receta facultativa. Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o por receta facultativa. • Uso indicado: para un solo paciente. • ⚠ Advertencia: Sólo para alimentación enteral y/o medicamentos recetados (Rx). • Los Juegos de extensión MIC-KEY® con Conectores ENFit® están hechos para conectar con el tubo de alimentación por gastrostomía de perfil plano MIC-KEY®, las Jeringas para alimentación enteral con Conectores ENFit® y las Bolsas para administrar alimento con Conectores ENFit®.

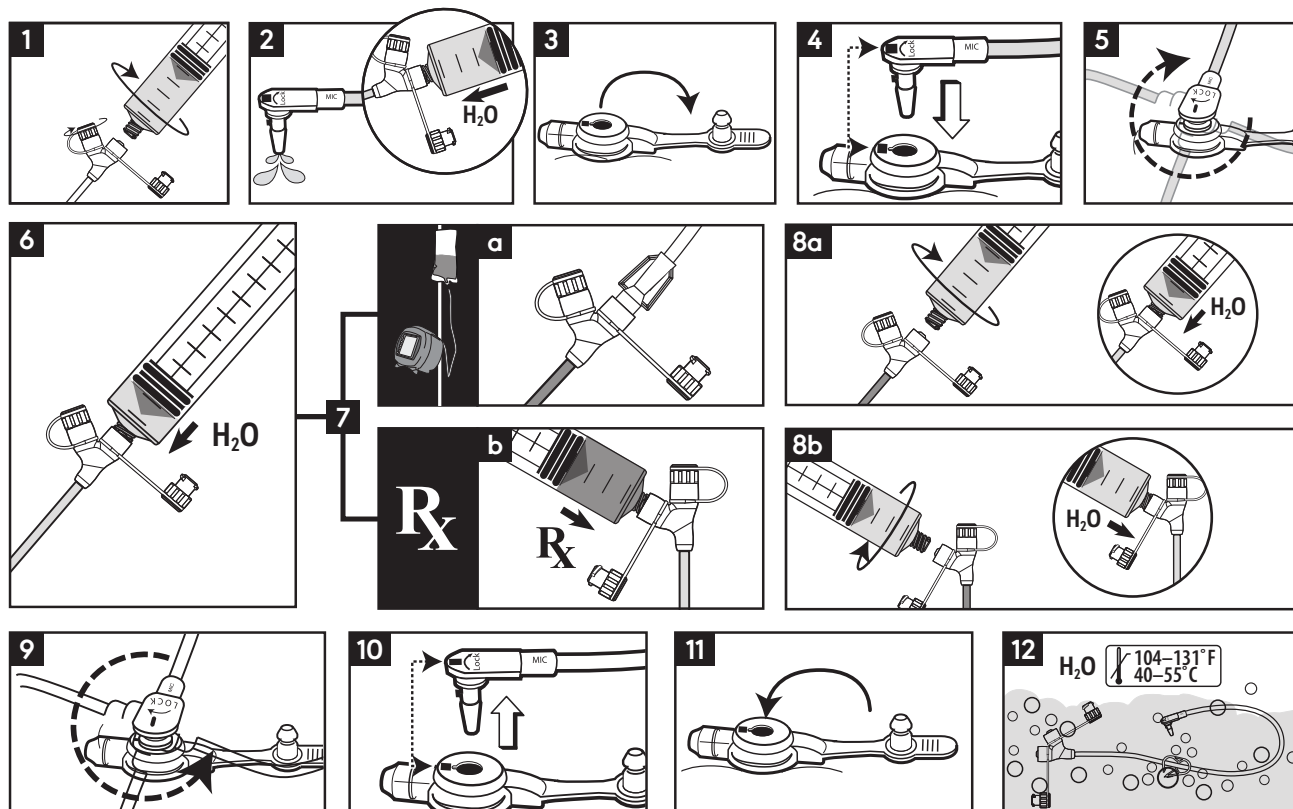

Mantenimiento del dispositivo: después de cada uso, limpie la extensión con agua tibia y jabón y luego enjuáguela con abundante agua. **Duración del dispositivo:** está pensado para utilizarse varias veces para un solo paciente durante un máximo de 14 días.

(CS) **Prodloužovací souprava MIC-KEY® na nepřetržité podávání výživy s konektory ENFit®, pravouhlým konektorem SECUR-LOK® a 2 otvory tvaru „Y“ na konektory a svorku** - Vyrobeno bez prírodného gumového latexu. • Produkt není vyroben s DEHP jako plastifikátor. • Rx Only: Pouze na předpis: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jeho předpis. • Pouze pro použití u jediného pacienta. • **⚠Varování:** Pouze pro enterální výživu a/nebo léky (Rx). • Prodloužovací souprava MIC-KEY® s konektory ENFit® jsou určeny pro spojení s nízkoprofilovou gastrostomickou výživovou trubicí MIC-KEY®, enterálními výživovými striečkami s konektory ENFit® a sáčky na podávání výživy s konektory ENFit®. **Následná péče o zařízení:** Po každém použití umyte prodloužovací soupravu teplou mydelnou vodou a důkladně ji opláchněte. **Životnost zařízení:** jsou určeny k opakovanému použití u jednoho pacienta po dobu až 14 dnů.

(DA) **MIC-KEY® kontinuert ernæringsindgivelsesforlænger med ENFit® fittings, SECUR-LOK® vinkelstuds, strømté med ENFit® fittings og klemme.** - Ikke fremstillet af naturgummilætex. • Ikke fremstillet med DEHP blødgøringsmiddel. • Rx Only: Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordning af en læge. • Kun beregnet til brug på én patient. • **⚠Advarsel:** Kun beregnet til enteral ernærings- og lægemiddelindgivelse (Rx). • MIC-KEY® forlængere med ENFit® fittings er beregnet til tilslutning til MIC-KEY® gastrostomiernæringssonder med lav profil, enteralerørernæringsprojektor med ENFit® fittings og ernæringsposer med ENFit® fittings. **Pleje af udstyret:** Efter hver brug skal du vaske forlængersættet med varmt sæbevand og skylles grundigt efter. **Udstyrets brugstid:** Udstyret er beregnet til flergangsbrug på en enkelt patient i en periode på op til 14 dage.

(ET) **MIC-KEY® pidevata pikenduskomplekt ENFit® konektorite, SECUR-LOK® täisnurkse konektori ja 2 avaga „Y“-kujuiliste ENFit® konektorite ning klambirga.** - E ole valmistatud looduslikust kummilakatsist. • Toote valmistamisel ei ole plastifikaatorina kasutatud DEHP-d. • Rx Only: Ainult Rx: USA föderaalseadused lubavad seda seadet müüa ainult arstidel või arsti korraldusel. • Kasutamiseks ainult ühel patsiendil. • **⚠Hoiatusi:** ainult enteraalseks toitmiseks ja/või ravimi manustamiseks (Rx). • ENFit® konektoritega MIC-KEY® pikenduskomplektid on mõeldud MIC-KEY® madala profiiliga gastrostoomia toiteotsandi, ENFit® konektoritega enteraalse toitmise süstele ja ENFit® konektoritega toidu manustamise kohtade ühendamiseks. **Seadme kasutusees:** pärast iga kasutuskorda peske pikenduskomplekti sooja seebiveega ning loputage põhjalikult. **Seadme järelhooldus:** see on ette nähtud ühel patsiendil mitmekordseks kasutamiseks kuni 14 päeva.

(EL) **Σετ προεκτάσεως συνεχούς σίτισης MIC-KEY® με συνδεόμενα ENFit®, σύνδεσμο ορθής γωνίας SECUR-LOK®, εξάρτημα 2 θύρων σχήματος «Y» με συνδεόμενα ENFit® και σφικτήρα** - Δεν παρασκευάζεται με φυσικό ελαστικό λάτεξ. • Το προϊόν ΔΕΝ κατασκευάζεται με χρήση θραύσιμων οδόντων (DEHP) ως πλαστικοποιητή. • Rx Only: Μόνο με συνταγή ιατρού: Η ομοιοπρόσθιμη νομοθεσία (HIPA) περιορίζει την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής μόνο από ιατρό ή με συνταγή ιατρού. • Για χρήση σε έναν ασθενή μόνο. • **⚠Προειδοποίηση:** Αποκλειστικά για εντερική σίτιση και/ή χορήγηση φαρμάκων (Rx). • Τα Σετ προεκτάσεως MIC-KEY® με συνδεόμενα ENFit® προορίζεται για σύνδεση με τον Σωλήνα σίτισης ενός ναοστρωτήρα χαμηλού προφίλ MIC-KEY®, τις Σύριγγες εντερικής σίτισης με συνδεόμενα ENFit®, και τους Ασκούς χορήγησης σίτισης με συνδεόμενα ENFit®. **Φροντίδα της συσκευής μετά τη θεραπεία:** Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το σετ επαρκώς με ζεστό νερό και αποστεινί και ξεπλύνετε σχολαστικά. **Διάρκεια ζωής της συσκευής:** Προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις για έναν μόνο ασθενή για έως και 14 ημέρες.

(IT) **Set di estensione per alimentazione continua MIC-KEY® con connettori ENFit®, connettore ad angolo retto SECUR-LOK® e connettori ENFit® con raccordo a "Y" a 2 porte e morsetto** - Non fabbricato in lattice di gomma naturale. • Questo prodotto non è realizzato con DEHP come plastificante. • Rx Only: Solo dietro prescrizione medica: la normativa federale statunitense limita la vendita del presente dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione di un medico. • Da usarsi esclusivamente su un singolo paziente. • **⚠Avvertenza** - Esclusivamente per la somministrazione di nutrizione e/o farmaci per via enterale (Rx). • I set di estensione MIC-KEY® con connettori ENFit® si collegano al tubo MIC-KEY® a basso profilo per alimentazione tramite gastrostomia, alle siringhe per nutrizione enterale con connettori ENFit® e alle sacche di alimentazione con connettori ENFit®. **Cura successiva del dispositivo:** dopo ogni utilizzo, lavare il kit di prolunga con acqua tiepida e sapone, quindi risciacquare accuratamente. **Durata del dispositivo:** è destinato a essere utilizzato più volte per un singolo paziente per un massimo di 14 giorni.

(LV) **MIC-KEY® ilgostāsa barošanās pagarinājuma komplekts ar ENFit® savienotājiem, SECUR-LOK® taisnleņķa savienotāju 2 portu "Y" ENFit® skavu** - Nav izgatavots no dabīgās gumijas lateksa. • Izstrādājums nav izgatavots ar DEHP kā plastifikatoru. • Rx Only: Tikai ar ārsta recepti: ASV federālās likums nosaka šīs ierīces pārdošanu tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma. • Lietot tikai vienam pacientam. • **⚠Brīdinājums:** Tikai enterālā barošanai un/vai receptuāļai zāļu ievadei (Rx). • MIC-KEY® pagarinājuma komplekti ar ENFit® savienotājiem ir paredzēti savienojumam ar MIC-KEY® kompaktā gastrostomijas barošanas zondi, enterālās barošanas šļircēm ar ENFit® savienotājiem, un barošanas maisījumiem ar ENFit® savienotājiem. **Ierīces pēcapkope:** Pēc katras lietošanas nomazgājiet pagarinātāja komplektu ar siltu ziepju ūdeni un rūpīgi noskalojiet. **Ierīces kalpošanas laiks:** Tas ir paredzēts lietošanai vairākas reizes vienam pacientam līdz 14 dienām.

(LT) **MIC-KEY® ilginamasis pastovaus maitinimo priedas su ENFit® jungtimis, stačiakampė SECUR-LOK® jungtimi ENFit® dviskulio Y adapteriu ir spaustu** - Pagaminta be natūraliojo kaučiuko lateksu. • Gaminys pagamintas nenaudojant plastiklio DEHP. • Rx Only: Receptinis prietaisas – federaliniai (JAV) įstatymai numato, kad jis įtaisą galima parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu. • Naudooti tik vienam ligoniui. • **⚠Įspėjimas:** Skirta tik enterinei mitybai ir (ar) vaistams (Rx). • MIC-KEY® ilginamieji priedai su ENFit® jungtimis yra skirti prijungti prie MIC-KEY® kompaktiškų gastrostominių maitinimo zondu, enterinio maitinimo švirkšto su ENFit® jungtimis ir lašinio maitinimo maišų su ENFit® jungtimis. **Priemonės priežiūrai po naudojimo:** kaskart panaudoję nuplaukite ilginimo rinkinį šiltu, muiliniu vandeniu ir kruopščiai išskalaukite. **Priemonės naudojimo laikotarpis:** skirta naudoti kelis kartus vienam pacientui iki 14 dienų.

(HU) **MIC-KEY® folyamatos adagolóhosszabbító-készlet ENFit® csatlakozóval, SECUR-LOK® jobb boka csatlakozóval, valamint 2 portos „Y” ENFit® csatlakozóval és szorítóval** - Nem természetesen latexgumiból készül. • A termék nem tartalmaz DEHP (2,2-etilhexil--ftalát) lágyítószerrel. • Rx Only: Kizárólag orvosi rendelvényre: Az (Amerikai Egyesült Államok) szövetségi törvényei értelmeben az eszköz csak orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető. • Egyyszer használatos. • **⚠Figyelem:** Csak belső táplálásra és/vagy gyógyszeradagolásra (Rx). • Az ENFit® csatlakozóval ellátott MIC-KEY® hosszabbító-készlet csatlakoztatható a MIC-KEY® alacsony profilú gasztrosztómias adagolószondához, az enterális tápláláshoz használt, ENFit® csatlakozóval ellátott fecskendőhöz és az ENFit® csatlakozóval ellátott adagolószákhoz. **Használat után tisztítás:** Minden használat után mossa el a hosszabbító-készletet meleg mosószéres vízzel, majd öblítse le alaposan. **Eszköz élettartama:** A készlet egyetlen betegten, több alkalommal, legfeljebb 14 napig használható.

(NL) **MIC-KEY® verlengset voor continuvoeding met ENFit® verbindingsstukken, SECUR-LOK® haaks verbindingsstuk en ENFit® verbindingsstukken met 2-ports "Y"-stuk en klem** - Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. • Het product is niet vervaardigd met DEHP als weekmaker. • Rx Only: Uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar: Volgens de federale wetgeving (van de Verenigde Staten) mag dit medische hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht. • Uitsluitend voor gebruik bij een enkele patiënt. • **⚠Waarschuwing:** uitsluitend voor enterale voeding en/of medicatie (Rx). • De MIC-KEY® verlengsets met ENFit® verbindingsstukken dienen aangesloten te worden op de MIC-KEY® voedingssonde met laag profiel voor gastrostomie, enterale voedingsspuiten met ENFit® verbindingsstukken en toedieningszakken van de voedingsoplossing met ENFit® verbindingsstukken. **Nazorg van apparat:** Was de Extension Set na elk gebruik met warm zeepsop en spoel deze grondig af. **Levensduur apparaat:** Het is bedoeld om meerdere keren te gebruiken voor één patiënt gedurende maximaal 14 dagen.

(NO) **MIC-KEY® kontinuerlig mateutvidelsessett med ENFit® koblinger, SECUR-LOK® rettvinglet kobling og 2-port Port "Y" ENFit® koblinger og klemme** - Ikke laget med naturgummilætex. • Produktet er ikke produsert med DEHP som plastiseringsmiddel. • Rx Only: Fås kun på resept: Amerikansk federal lov begrenser dette apparatet til salg til eller på ordre fra lege. • Kun for engangsbruk. • **⚠Advarsel:** Kun for enteral næring og medisinering (Rx). • MIC-KEY® utvidelsessett med ENFit® koblinger er beregnet for å kobles til MIC-KEY® lavprofil tube, enterale mateprosjekter med ENFit® koblinger og næringsadministreringsposer med ENFit® koblinger. **Enhetsens ettervern:** Etter hver bruk, vask forlengersettet med varmt, såpevann og skyl grundig. **Enhetsens levetid:** Den er ment å brukes flere ganger for en enkelt pasient i opptil 14 dager.

(PT) **Zestaw przedłużający MIC-KEY® do żywienia ciągłego ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK® pod kątem prostym i z 2 portami typu "Y" ENFit® oraz zaciskiem** - Wyprodukowano bez lateksu naturalnego. • Produkt nie jest wytwarzany z użyzciem DEHP jako środka uplastyczniającego. • Rx Only: Wyłącznie na receptę: Zgodnie z prawem federalnym (w USA)

urządzenie to może być sprzedawane wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie. • Do użytku tylko u jednego pacjenta. • **⚠Ostrzeżenie:** Wyłącznie do żywienia dojelitowego oraz/lub podawania leków (Rx). • Zestawy przedłużające MIC-KEY® ze złączami ENFit® przeznaczone są do niskoprofilowych zgłębników gastrostomijnych MIC-KEY®, strzykawek do żywienia dojelitowego ze złączami ENFit® i worków wypełnionych preparatem żywniowym ze złączem ENFit®. **Konservacja urządzeń:** po każdym użyciu umyć zestaw przedłużający ciepłą wodą z mydłem i dokładnie spłukać. **Okres eksploatacji urządzenia:** produkt jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta przez okres do 14 dni.

(PT) **Conjunto de extensão para alimentação continua MIC-KEY® com conectores ENFit®, conector em ângulo recto SECUR-LOK® e 2 conectores ENFit® com dois orifícios em "Y" e pinça** - Não são feitas com látex de borracha natural. • Este produto não é fabricado com di-ethylhexil ftalato (DEHP) como plastificante. • Rx Only: Apenas sob receita médica: A lei federal (E.U.A.) limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico. • Apenas para utilização única. • **⚠Advertência:** para alimentação e/ou administração de medicamentos (Rx) apenas por via entérica. • Os conjuntos de extensão MIC-KEY® com conectores ENFit® destinam-se a ligar ao tubo para alimentação por gastrostomia pouco visível MIC-KEY®, as seringas para alimentação por via entérica com conectores ENFit® e aos sacos para administração de alimentos com conectores ENFit®. **Cuidados com o dispositivo:** Após cada utilização, lave o conjunto de extensão com água morna e sabão e enagque bem. **Vida útil do dispositivo:** Destinam-se a ser utilizados várias vezes num único paciente durante um máximo de 14 dias.

(RU) **Set prelungitor MIC-KEY® pentru alimentare continuă, cu conectori ENFit®, conector în unghi drept SECUR-LOK® și adaptor în Y cu 2 porturi ENFit® și demă** - Nu este produs din latex din cauciuc natural. • Acest produs nu conține DEHP ca plastifiant. • Rx Only: Doar Rx: Conform legii federale S.U.A., acest dispozitiv poate fi vândut numai de către un medic sau la ordinele acestuia. • A se utiliza numai la un singur pacient. • **⚠Avertizare:** Numai pentru alimentare și/sau medicatie enterică (Rx). • Seturile prelungitoare MIC-KEY® cu conectori ENFit® sunt destinate conectării la tubul simplu de alimentare gastrostomică MIC-KEY®, seringile de alimentare enterale conectate cu conectori ENFit® și pungile de alimentare cu conectori ENFit®. **Îngrijirea după utilizare:** După fiecare utilizare, spălați Setul de extensie cu apă caldă și săpun și clătiți bine. **Durata de viață a dispozitivului:** Este conceput pentru a fi utilizat de mai multe ori la un singur pacient, timp de până la 14 zile.

(RU) **Удлинительный набор для непрерывного ввода питания MIC-KEY® с разъемными ENFit®, прямоугольным разъемом SECUR-LOK® и 2 "Y"-образными каналами ENFit® и зажимом** - При изготовлении не использованы натуральный латекс. • Изделие не содержит диэтилгексилфталата (DEHP) в качестве пластификатора. • Rx Only: Отпускается только по предписанию врача. Согласно федеральному законодательству (США, данное устройство подлежит продаже только врачам или по их заказу. • Предназначено для использования только у одного пациента. • **⚠Предостережения:** Предназначено только для введения составов для парентерального питания и лекарственных средств (Rx). • Удлинительные наборы MIC-KEY® с разъемными ENFit® предназначены для соединения с низкoproфильной гастростомической питательной трубкой MIC-KEY®, шприцами для парентерального питания с разъемными ENFit®, а также с пакетами для ввода питания с разъемными ENFit®. **Уход за изделием:** после каждого использования промойте набор для питания теплым мыльным раствором и тщательно прополощите. **Срок службы изделия:** набор предназначен для многократного использования у одного пациента в течение до 14 дней.

(SK) **Prodlužovacia súprava MIC-KEY® na nepretržité podávanie výživy s konektormi ENFit®, pravouhlým konektorm SECUR-LOK® a 2 otvormi tvaru „Y“ na konektory a svorku** - Vyrobené bez prírodného gumového latexu. • Produkt nie je vyrobený s DEHP ako plastifikátorom. • Rx Only: Len na predpis: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto nástroja na lekára alebo na jeho predpis. • Len na použitie u jediného pacienta. • **⚠Varovanie:** Len pre enterálnu výživu a/alebo lieky (Rx). • Prodlužovacie súpravy MIC-KEY® s konektormi ENFit® sú určené na spojenie s nízkoprofilovou gastrostomickou výživovou trubicou MIC-KEY®, enterálnymi výživovými striečkami s konektormi ENFit® a vrecami na podávanie výživy s konektormi ENFit®. **Následná starostlivosť o zariadenie:** Po každom použití umyte prodlužovaciu súpravu teplou mydelnou vodou a dôkladne ju opláchnite. **Životnosť zariadenia:** Je určené na viackrátové použitie pre jedného pacienta po dobu až 14 dní.

(SL) **MIC-KEY® podaljšek za neprekinjeno hranjenje z ENFit® konektori, s SECUR-LOK® pravokotnim konektorjem in konektori z dvema priključkoma „Y” ENFit® spenkami** - Ni narejeno iz kavčuka iz naravnega lateksa. • Izdelku ni dodan DEHP za mehčalec. • Rx Only: Samo na recept: Zvezni (ZDA) zakon predpisuje, da sme ta pripomoček prodati samo zdravniku oz. se ga lahko proda samo po naročilu zdravnika. • Za uporabo na samo enemu bolniku. • **⚠Opozorilo:** Samo za enteralno hranjenje in/ali dajanje zdravil (Rx). • MIC-KEY® podaljški z ENFit® konektori so namenjeni povezavi z MIC-KEY® gastrostomsko cevko za hranjenje z nizkim profilom, enteralnimi brizgalkami za hranjenje z ENFit® konektori in vrečkami za doajanje hrane z ENFit® konektori. **Skrb za pripomoček:** Komplet podaljškov po vsaki uporabi umijte s toplo milnico in ga temeljito sperite. **Življenjska doba pripomočka:** Namenjeni so večkratni uporabi pri enem bolniku do 14 dni.

(FI) **Jatkuvan ruokinnan MIC-KEY®-jatkosarja, jossa on ENFit®-liittimet, SECUR-LOK®-suorakulmalitiin ja 2-porttinen ENFit®-Y-liitin ja puristin** - Ei valmistettu luonnonkumilakatsista. • Tuotetta ei ole valmistettu käyttämällä DEHP:tä pehmittimänä. • Rx Only: Ainoastaan reseptillä: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myytävissä lääkärin toimesta tai määräyksellä. • Potilaskohtainen. • **⚠Varoitus:** Vain enteraalista ruokintaa tai lääkitystä (Rx) varten. • MIC-KEY®-jatkosarjat, joissa on ENFit®-liittimet, on tarkoitettu liitettäväksi seuraaviin: matalaprofilinen MIC-KEY®-maha-avanneruokintaleike, enteraaliset ruokintaruskit, joissa on ENFit®-liittimet, ja ruokintapussit, joissa on ENFit®-liittimet. **Laiteen jälkihoito:** pesä pidennysarja jokaisen käyttökerran jälkeen lämpimällä saippuvedellä ja huuhtele huolellisesti. **Laiteen käyttökäsi:** sitä on tarkoitus käyttää useita kertoja yhdelle potilaalle enintään 14 päivän ajan.

(SV) **MIC-KEY® förångslängsset för kontinuerlig matning, med ENFit®-kopplingar, SECUR-LOK® rätvinkligkoppling och Y-port med 2 ENFit®-kopplingar samt klämma** - Ej tillverkad med naturgummilætex. • Denna produkt är INTE tillverkad med DEHP som plastfyllgörare. • Rx Only: Endast på förskrivning av läkare: Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare. • Endast för användning till en patient. • **⚠Varning!** Endast för enteral näringstillförelse och/eller (Rx) mediciner. • MIC-KEY® förångslängsset med ENFit®-kopplingar är avsedda att anslutas till MIC-KEY® gastrostomisond i lågprofil, sonsprutor för enteral näringstillförelse med ENFit®-kopplingar, samt sondmatningspåsar med ENFit®-kopplingar. **Skötsel av enheten:** Efter varje användning, tvätta förångslängsset med varmt tvålatten och skölj noggrant. **Enhetsens livslängd:** Enheten är avsedd att användas flera gånger på en enda patient i upp till 14 dagar.

(TB) **MIC-KEY® ENFit® Konektörleri Sürekli Besleme Uzama Seti, SECUR-LOK® Dik Açılı Konektör ve 2 Port "Y" ENFit® Konektör ve Keleçe** - Doğal kauçuk lateksden imal edilmez. • Bu ürün plastikleştirici olarak DEHP kullanılarak üretilmemiştir. • Rx Only: Yalnızca Reçete ile: Federal (A.B.D.) kanunları bu cihazın bizzat hekim tarafından veya hekim talimatı üzerine satışını yasaklamaktadır. • Sadece Tek Hastalık Kullanım İçindir. • **⚠Uyarı:** Sadece enteral besleme ve/veya ilaç (Rx) için. • MIC-KEY® ENFit® Konektörleri Uzama setleri MIC-KEY® ENFit® Konektörleri Düşük Profil Gastrostomi Besleme Borusu, Enteral Besleme Şırıngaları ve ENFit® Konektörleri Besleme Uygulama Çantaları ile bağlanmak üzere tasarlanmıştır. **Kullanım Sonrası Çizah Bakımı:** Her kullanımdan sonra Uzama Setini ilk, sabunu su ile yıkayın ve iyice duruyun. **Çizah Kullanım Ömrü:** Tek bir hastada 14 güne kadar birden fazla kez kullanılması amaçlanmıştır.

(JA) **MIC-KEY®連続栄養補給エクステンションセット (ENFit®コネクタ、SECUR-LOK®直角コネクタ、2ポート「Y」ENFit®コネクタとクランプ付き)** - 天然ゴムラテックス製ではありません。• 製品 の可塑剤 (DEHP を使用していません)。• Rx Only: 処方による使用のみ (米)：米国連邦法では、本装置の販売先は医師自身あるいは医師の指示を受けた者に限られています。• 再使用禁止。• 再使用禁止。• **⚠警告：**経腸栄養剤 / 薬剤専用 (Rx)。• MIC-KEY®エクステンションセット (ENFit®コネクタ 付き) は、MIC-KEY® ロアプロフィール胃腸栄養補給チューブ、経腸栄養補給シリンジ (ENFit®コネクタ 付き)、栄養補給投与/ポンプ (ENFit®コネクタ 付き) と接続するために使用されます。機器のアフターケア：使用後は、延長セットを温かい石鹸水で洗ひ、十分に洗い流してください。機器のライフタイム：1 人の患者で最大 14 日間複数回使用することを目的としています。

(KO) **MIC-KEY® 연속 영양 세트, ENFit® 커넥터, SECUR-LOK® 직각 커넥터, 2개 Port "Y" ENFit® 커넥터 및 클램프 포함** - 천연 고무 라텍스로 제조하지 않음. • 가스제로서 DEHP로 제품을 제조하지 않았습니다. • Rx Only: 처방 전용: 미국 연방법에 따라 이 장치는 의사가 직접 판매하거나 의사의 지시에 따라 판매할 수 있습니다. • 한 명의 환자에만 사용하십시오. • **⚠경고:** 경장영양 및/또는 의약품(Rx)에 한함. • ENFit® 커넥터가 포함된 MIC-KEY® 영양 세트는 MIC-KEY® 소형 위루 금속 튜브, ENFit® 커넥터가 포함된 경장 금속 튜브, ENFit® 커넥터가 포함된 금속 비어 배에 연결하기 위한 제품입니다. **장치 애프터케어:** 매번 사용 후에는 따뜻한 비눗물로 확장 세트를 씻어내고 철저히 헹굽니다. **장치 수명:** 최대 14일 동안 한 명에게 여러 번 사용을 할 수 있습니다.